

COUVRE-MOIGNONS

KCN | KCM | KCW



Le couvre-moignon ALPS™ est léger et souple, et permet d'amortir en donnant plus de confort.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

ÉTROIT, MOYEN ET LARGE

1, 3 ET 5 PLIS


TRÈS COURT, COURT, MOYEN ET LONG

TROIS STYLES

TROIS TAILLES

TROIS ÉPAISSEURS

QUATRE LONGUEURS

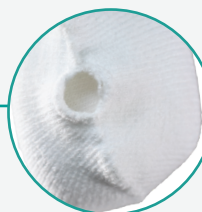

ORIFICE DISTAL(H)








ORIFICE DISTAL RENFORCÉ (HR)

SANS ORIFICE (N)



POINTS FORTS

-  Aide face aux variations de volume
-  Les fibres techniques permettent une tenue cool et confortable
-  Conserve sa forme au fil du temps ; étirement minimal, ne se rigidifie pas
-  **DÉSORMAIS DISPONIBLE EN LOTS !**
Une solution complète pour que les utilisateurs gèrent mieux les variations de volume du membre résiduel. Les épaisseurs les plus demandées sont à portée de main.

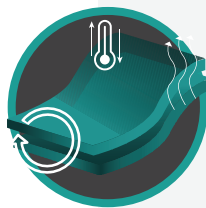

FABRIQUÉ AVEC DES FIBRES TECHNIQUES PREMIUM

CRÉE UN SYSTÈME DE GESTION DE L'HUMIDITÉ, POUR ÉLOIGNER LA TRANSPIRATION DU CORPS À TRAVERS LE TISSU, OÙ ELLE PEUT S'ÉVAPORER RAPIDEMENT.

AVEC LES LOTS, VOTRE UTILISATEUR PEUT :


- Sélectionner les couvre-moignons dont il a besoin pour gérer les variations de volume
- Toujours avoir des couvre-moignons disponibles lorsque les autres sont à laver



making lives better™

DIAGRAMME D'AJUSTEMENT

Il est recommandé que le couvre-moignon soit environ 5 cm plus long que l'emboîture prothétique

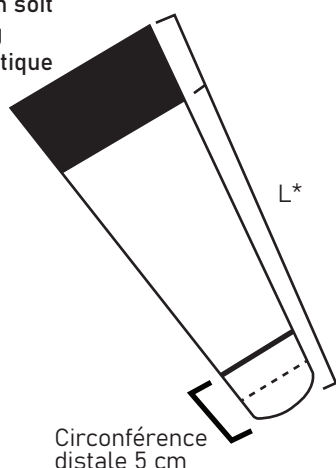

COMMENT MESURER

Mesures prise à 5 cm de l'extrémité distale

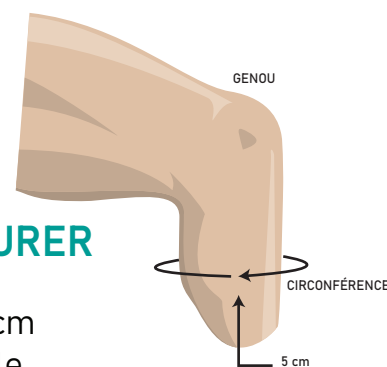


TABLEAU DE TAILLES

TROUVEZ L'AJUSTEMENT PARFAIT.

TAILLE DE MANCHON RECOMMANDÉE PAR ALPS	NIVEAU D'AMPUTATION	CIRCONFÉRENCE PROXIMALE	CIRCONFÉRENCE DISTALE À (5 cm)	*TAILLE DE L'EMBOÎTURE PROTHÉTIQUE 13-18 CM	*TAILLE DE L'EMBOÎTURE PROTHÉTIQUE 18-23 CM	*TAILLE DE L'EMBOÎTURE PROTHÉTIQUE 23-38 CM	*TAILLE DE L'EMBOÎTURE PROTHÉTIQUE 38-48 CM
20	BK	min. 20-max. 40 cm	20-23 cm	KCN-8-X-Y	KCN-10-X-Y	KCN-14-X-Y	KCN-18-X-Y
24, 26, 28	BK	min. 30-max. 60 cm	23-31 cm	KCM-8-X-Y	KCM-10-X-Y	KCM-14-X-Y	KCM-18-X-Y
32, 38	AK	min. 40-max. 80 cm	31-36 cm	KCW-8-X-Y	KCW-10-X-Y	KCW-14-X-Y	KCW-18-X-Y

X indique l'épaisseur en plis (1 pli = 1,5 mm ; 3 plis = 2 mm ; 5 plis = 2,5 mm)

Y indique l'extrémité distale (N sans orifice ; H avec orifice ; HR avec orifice renforcé)

EXEMPLES :

Couvre-moignon KCN-08-3-H, étroit, très court, 3 plis, avec orifice

Couvre-moignon KCM-10-1-N, moyen, court, 1 pli, sans orifice

Couvre-moignon KCW-18-5-HR, large, long, 5 plis, avec orifice renforcé



Tel +420 377 223 127 | Fax +420 377 223 010

www.easyliner.eu | info@easyliner.eu

Božkovské náměstí 17/21, 32600 Plzeň - Czech Republic

