

ULTRASEAL SILICONE LINER

Krok wyżej.

USHSL | USHSC | USLSL | USLSC | USUSL | USUSC



OPIS

Doświadcz innowacyjnego linera silikonowego UltraSeal, który jest starannie wykonany, aby sprostać wymaganiom użytkowników po amputacji kończyny powyżej i poniżej kolana – niezależnie od ich poziomów aktywności.

Dzięki zintegrowanemu pierścieniowi dostępnemu na trzech różnych wysokościach, użytkownicy mają zapewnione szczelne połączenie po wsunięciu kikuta do leja. Wraz z OptiSil liner daje niezwykle komfort i zoptymalizowane zawieszenie, co razem zapewnia maksymalną wygodę codziennego użytkowania.

W wersji z zamkiem, UltraSeal dodatkowo oferuje podwójny system zawieszenia, który bezproblemowo łączy zalety zawieszania z zamkiem i technologii uszczelniającej, zapewniając nieporównywalną funkcjonalność.

Nr CZĘŚCI	ZAWIESZENIE
USHSL/USLSL/USUSL	ZAMEK
USHSC/USLSC/USUSC	PRÓŻNIA

Zalecany dla wszystkich poziomów aktywności.



DLACZEGO ULTRA?

1

MNIEJSZE OGRANICZENIA.

Zewnętrzna tkanina klasy premium łączy w sobie wytrzymałość, trwałość oraz zmienną rozciągliwość, dając komfortową elastyczność.

2

BEZPIECZEŃSTWO ZAMKA.

Funkcja zamka zapewnia, że użytkownicy otrzymują zawieszenie, które jest bezpieczne, mocne i wygodne.


3

PRZYJAZNA POWIERZCHNIA SILIKONU.


OptiSil oferuje ciekłą, lekką i gładką wewnętrzną powierzchnię o współczynniku tarcia wynoszącym 1/5 współczynnika normalnego silikonu, co zapewnia znakomite dopasowanie się do skóry.

PRZEKRÓJ


1 GRUBOŚĆ | OPCJA 3 WYSOKOŚCI PIERŚCIENIA | PRÓŻNIA I ZAMEK

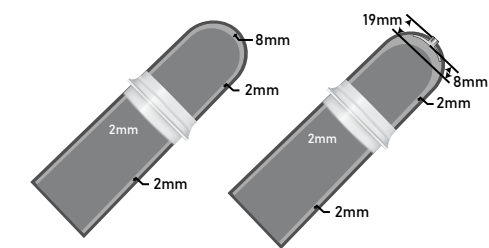

HIGH ring: Pierścień wysoki zaczyna się 18 cm od środka dystalnego końca.

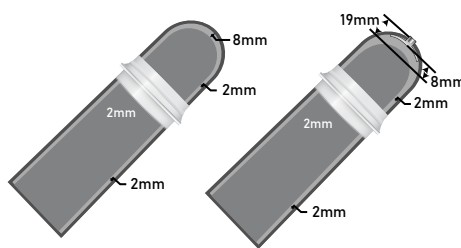


LOW ring: Pierścień niski zaczyna się 13 cm od środka dystalnego końca.

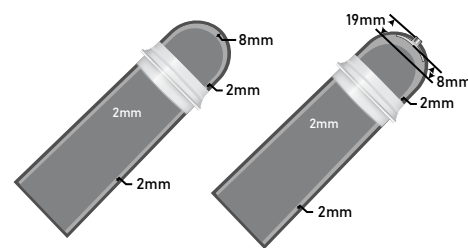

ULTRA LOW ring: Pierścień ultra-niski zaczyna się 8 cm od środka dystalnego końca.

JAK WYKONAĆ POMIAR

Pomiary wykonane 6 cm od dystalnego końca

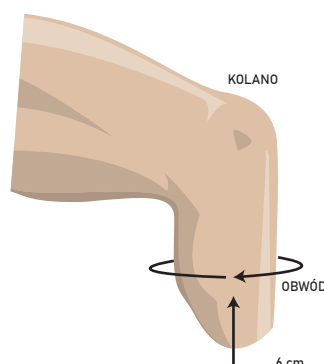

TABELE ROZMIARÓW

ZMIERZONY ROZMIAR (CM)	PIERŚCIEŃ WYSOKI Z ZAMKIEM 2MM	PIERŚCIEŃ WYSOKI Z PRÓŻNIĄ 2MM	PIERŚCIEŃ NISKI Z ZAMKIEM 2MM	PIERŚCIEŃ NISKI Z PRÓŻNIĄ 2MM	PIERŚCIEŃ ULTRA NISKI Z ZAMKIEM 2MM	PIERŚCIEŃ ULTRA NISKI Z PRÓŻNIĄ 2MM
20-21 cm	USHSL20	USHSC20	USLSL20	USLSC20	USUSL20	USUSC20
22-23 cm	USHSL22	USHSC22	USLSL22	USLSC22	USUSL22	USUSC22
24-25 cm	USHSL24	USHSC24	USLSL24	USLSC24	USUSL24	USUSC24
26-27 cm	USHSL26	USHSC26	USLSL26	USLSC26	USUSL26	USUSC26
28-29 cm	USHSL28	USHSC28	USLSL28	USLSC28	USUSL28	USUSC28
30-31 cm	USHSL30	USHSC30	USLSL30	USLSC30	USUSL30	USUSC30
32-34 cm	USHSL32	USHSC32	USLSL32	USLSC32	USUSL32	USUSC32
35-37 cm	USHSL35	USHSC35	USLSL35	USLSC35	USUSL35	USUSC35
38-40 cm	USHSL38	USHSC38	USLSL38	USLSC38	USUSL38	USUSC38
41-43 cm	USHSL41	USHSC41	USLSL41	USLSC41	USUSL41	USUSC41
44-47 cm	USHSL44	USHSC44	USLSL44	USLSC44	USUSL44	USUSC44