

真空悬挂 凝胶套

PSI

凝胶套，远端无织物附着

产品描述

阿尔卑斯真空悬挂凝胶套PSI真空悬挂凝胶套通过密封在小腿假肢上来改善悬挂。EasyGel简便型凝胶提供舒适性和耐用性，减轻皮肤因纵向剪应力产生的压力。凝胶中含抗氧化剂，对皮肤有益。真空悬挂凝胶套可与目前市场上使用的阀门吸附或真空系统一起使用。

主要特点



裸露的凝胶部分可实现密封功能



位于远端的织物起到导气作用



衬垫近端部分的拉伸不受任何限制



有两种厚度可供选择：一种是6毫米均匀厚度；另一种是从远端的6毫米逐渐缩减至3毫米的锥形厚度




EASYGEL
简便型凝胶



衬垫型


截面图

6MM均厚或6/3MM渐变

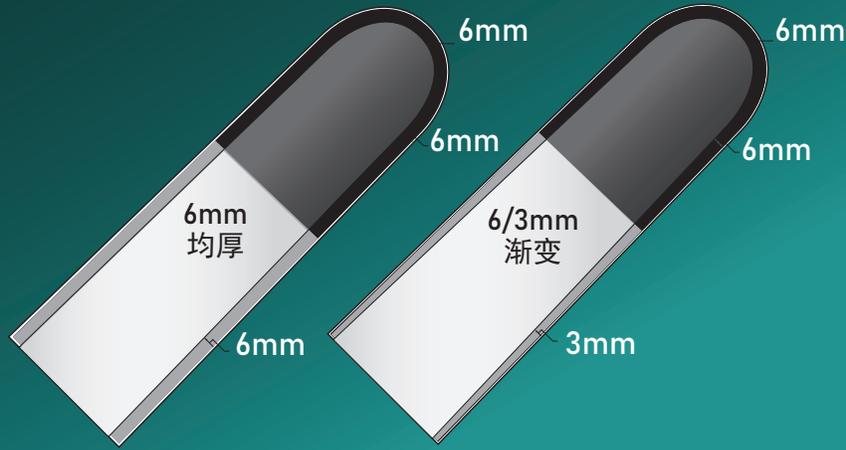

如何测量

测量残肢末端往上6cm处的围长

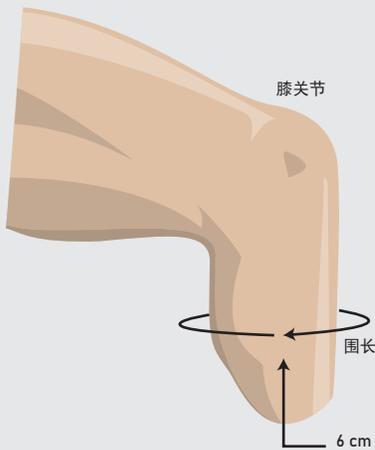

尺码表

测量围长 (CM)	衬垫型 6MM 均厚 6/3MM 渐变
16-19 cm	PSI16 - (6 或 6/3)
20-23 cm	PSI20 - (6 或 6/3)
24-25 cm	PSI24 - (6 或 6/3)
26-27 cm	PSI26 - (6 或 6/3)
28-31 cm	PSI28 - (6 或 6/3)
32-37 cm	PSI32 - (6 或 6/3)
38-43 cm	PSI38 - (6 或 6/3)
44-53 cm	PSI44 - (6 或 6/3)



T: +86-731-55582976-801 | F: +86-731-55582976

www.easyliner.com.cn | china_salesrep@easyliner.com.cn

ALPS South China

MAKING
LIVES
BETTER