

VACUUM INTEGRATED PUMP

VIP®



DESCRIZIONE

ALPS VIP® è un generatore di vuoto pneumatico per protesi.

L'uso del VIP fornisce ai pazienti un contatto totale costante quando indossano la protesi. Ciò è fondamentale per la ripartizione uniforme del peso e per distribuire la sospensione della protesi sull'intera superficie dell'arto residuo.

Il vuoto creato dal VIP stabilizza il moncone, risolvendo qualsiasi problema connesso alla variazione di volume dell'arto residuo nell'arco della giornata.

CODICE

VIP-DH

VIP-DL

CARATTERISTICHE E BENEFICI PRINCIPALI

-  Gestisce in modo efficiente le fluttuazioni di volume dell'arto residuo, offrendo così un migliore controllo e comfort della protesi
-  Riduce l'intensità dei picchi di pressione sull'arto residuo, migliorando il comfort e fornendo maggiore libertà di movimento
-  Aiuta a preservare la salute della pelle migliorando la circolazione e aumentando di conseguenza l'ossigenazione dell'arto
-  Non compromette l'estetica della protesi

Facile da
installare

Migliora la
circolazione
sanguigna

Migliora il
comfort

Migliora la
camminata

Silenzioso

Leggero

DISPONIBILE IN DUE DIVERSI LIVELLI DI VUOTO ATTIVO

SCEGLIERE IL LIVELLO DI
VUOTO IN BASE A:




LIVELLO DI ATTIVITA'



CONDIZIONI DELLA PELLE

ALTO VUOTO ATTIVO
(Rosso)
10-13 inHg

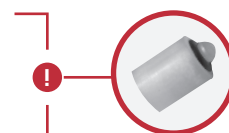


Si consiglia di utilizzare
la **mini valvola** per prevenire
il dislocamento del VIP dalla sede


BASSO VUOTO ATTIVO
(Verde)
5-8 inHg



SENZA PIASTRA DI MONTAGGIO

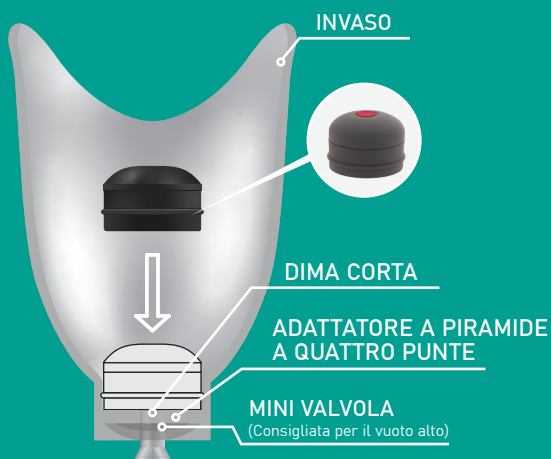

CON PIASTRA DI MONTAGGIO

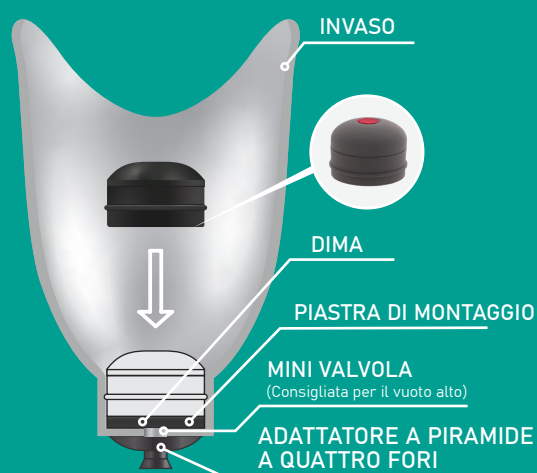

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

	ALTO VUOTO ATTIVO (ROSSO)	BASSO VUOTO ATTIVO (VERDE)
CODICE	VIP - DH	VIP - DL
DIAMETRO	66MM	66MM
ALTEZZA	48MM	48MM
PESO	75G	64G
MATERIALE	SILICONE	SILICONE

PER EFFETTUARE L'ORDINE UTILIZZARE I CODICI SOTTOSTANTI

NOME PRODOTTO	CODICE PRODOTTO
DIMA	VE319 - D
DIMA CORTA	VE319 - SD
PIASTRA DI MONTAGGIO	VE819 - P
LOCK (PICCOLO)	VIP-L1120-S
MINI VALVOLA (Vivamente raccomandata)	MV-009
KIT MINI VALVOLA	LMV-009
PIN (4.8cm)	VIP-92L
PIN (3.0cm)	VIP-92S



Tel +39 051 86 06 42 | Fax +39 051 86 59 668

www.easyliner.eu | info@alpsitaly.com

V.le della Mercanzia, 85 | 40050 Argelato (BO) - Italy

