

VACUUM INTEGRATED PUMP

VIP®



DESCRIPCIÓN

El ALPS VIP® es un sistema de bombeo integrado de expulsión de aire para vacío elevado para encajes protésicos.

El uso de VIP proporciona a los pacientes un contacto total continuo al ponerse la prótesis, algo fundamental para una distribución del peso uniforme y para distribuir la suspensión de la prótesis sobre toda la superficie del muñón.

El vacío elevado creado por el VIP estabiliza el muñón, de manera que se superan todos los problemas relacionados con su cambios de volumen durante el día.

N.º PIEZA

VIP-DH

VIP-DL

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

-  Gestiona eficazmente la fluctuación del volumen del muñón, ofreciendo así un mejor control y confort de la prótesis
-  Reduce la intensidad de los picos de presión en el muñón, mejorando el confort y proporcionando una mayor libertad de movimiento
-  Ayuda a preservar la salud de la piel mejorando la circulación y consecuentemente aumentando la oxigenación de la extremidad residual
-  No altera el aspecto cosmético de la prótesis

Fácil de
instalar

Mejora la
circulación
sanguínea

Mejora el
confort

Mejora los
movimientos

Silencioso

Ligero

DISPONIBLE EN DOS NIVELES DE VACÍO ACTIVO

ELEGIR EL NIVEL DE VACÍO EN BASE A:




NIVEL DE ACTIVIDAD



CONDICIONES DE LA PIEL

ALTO VACÍO ACTIVO
(Rojo)


10-13 inHg

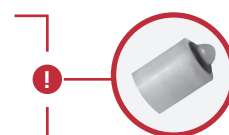


Recomendamos altamente el uso de la **mini válvula** para evitar la distracción distal

BAJO VACÍO ACTIVO
(Verde)

5-8 inHg

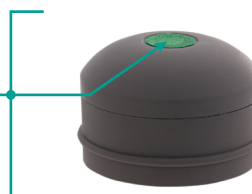

SIN PLACA DE MONTAJE

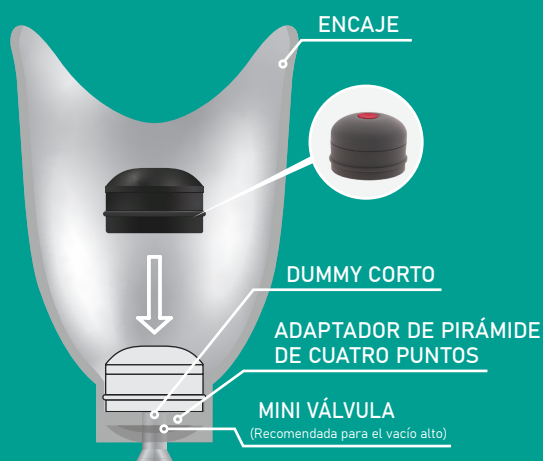

CON PLACA DE MONTAJE



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	ALTO VACÍO ACTIVO (ROJO)	BAJO VACÍO ACTIVO (VERDE)
CÓDIGO PRODUCTO	VIP - DH	VIP - DL
DIÁMETRO	66MM	66MM
ALTURA	48MM	48MM
PESO	75G	64G
MATERIAL	SILICONA	SILICONA

PARA REALIZAR EL PEDIDO UTILIZAR LOS CÓDIGOS A CONTINUACIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO DEL PRODUCTO
DUMMY	VE319 - D
SMALL DUMMY	VE319 - SD
PLACA DE MONTAJE	VE819 - P
BLOQUEO (PEQUEÑO)	VIP-L1120-S
MINI VÁLVULA (altamente recomendada)	MV-009
KIT MINI VÁLVULA	LMV-009
PIN (4.8cm)	VIP-92L
PIN (3.0cm)	VIP-92S



Tel +420 377 223 127 | Fax +420 377 223 010

www.easyliner.eu | info@easyliner.eu

Božkovské náměstí 17/21, 32600 Plzeň – Czech Republic

