

ЛАЙНЕР EXTREME™

AKDT | AKDTHD | AKFR | AKFRHD

Подходит для пациентов с трансфеморальной ампутацией и активных пациентов с транстибиальной ампутацией: версии с креплением и без



ОПИСАНИЕ

Лайнер ALPS® Extreme™ — решение для пациентов с трансфеморальной ампутацией, а также для активных пользователей с транстибиальной ампутацией.

Доступен в двух вариантах геля — GripGel и HD Gel, — что позволяет подобрать оптимальный уровень комфорта под индивидуальные потребности.


Вертикальная растяжимость снижена на 80 % по сравнению с другими лайнерами ALPS®, это обеспечивает повышенную стабильность и контроль посадки.

Артикул #	Тип крепления
AKDT/AKDTHD	Замковое
AKFR/AKFRHD	Вакуумное

Рекомендуется для всех уровней активности.



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

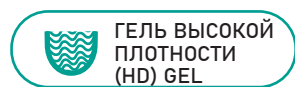

ГЕЛЬ ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ
(HD) GEL



GRIPGEL




ЗАМКОВЫЙ



ВАКУУМНЫЙ


- ✓ Коричневая ткань с ограниченной вертикальной растяжимостью минимизирует смещение избыточной кожи
- ✓ Более широкий дистальный конец, пропорциональный размеру лайнера, облегчает надевание
- ✓ Слегка липкая поверхность снижает образование складок в подколенной области
- ✓ Доступен в толщине 3 мм и 6 мм

СХЕМА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

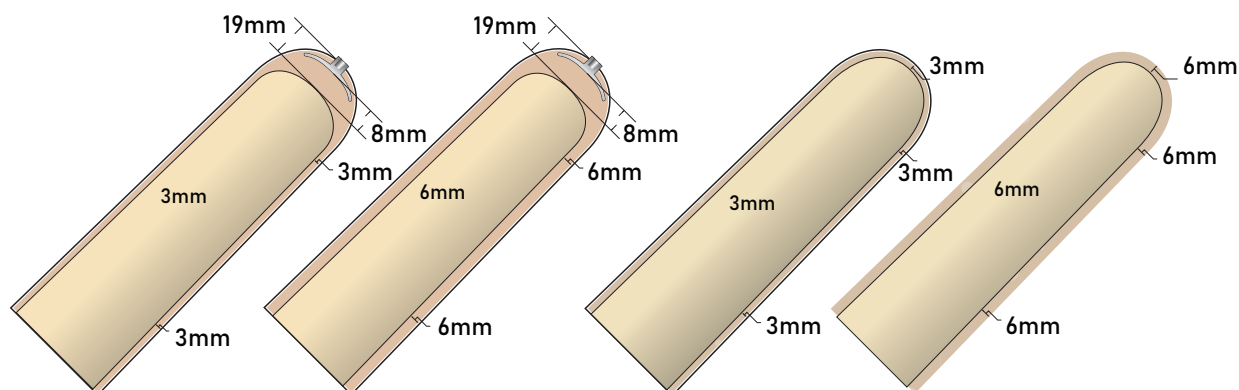

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Измерьте окружность остаточной конечности на расстоянии 6 см от дистального конца.

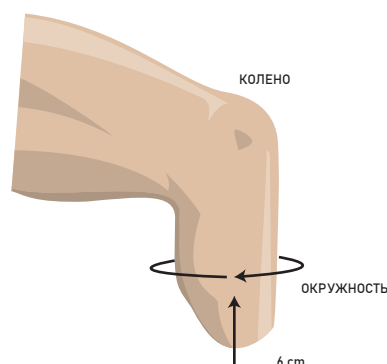

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ИЗМЕРЕННЫЙ РАЗМЕР (СМ)	ЗАМКОВЫЙ 3.0ММ или 6ММ	ВАКУУМНЫЙ 3.0ММ или 6ММ
16-19 cm	AKDT(HD) 16 - (3 или 6)	AKFR(HD) 16 - (3 или 6)
20-23 cm	AKDT(HD) 20 - (3 или 6)	AKFR(HD) 20 - (3 или 6)
24-25 cm	AKDT(HD) 24 - (3 или 6)	AKFR(HD) 24 - (3 или 6)
26-27 cm	AKDT(HD) 26 - (3 или 6)	AKFR(HD) 26 - (3 или 6)
28-31 cm	AKDT(HD) 28 - (3 или 6)	AKFR(HD) 28 - (3 или 6)
32-34 cm	AKDT(HD) 32 - (3 или 6)	AKFR(HD) 32 - (3 или 6)
35-37 cm	AKDT(HD) 35 - (3 или 6)	AKFR(HD) 35 - (3 или 6)
38-43 cm	AKDT(HD) 38 - (3 или 6)	AKFR(HD) 38 - (3 или 6)
44-53 cm	AKDT(HD) 44 - (3 или 6)	AKFR(HD) 44 - (3 или 6)