

ВСТРОЕННЫЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС

VIP®



ОПИСАНИЕ

ALPS VIP® — это интегрированный насос для вытеснения воздуха, создающий повышенный вакуум в протезной гильзе. Использование VIP® обеспечивает пациенту постоянный полный контакт с гильзой при надевании протеза. Это критически важно для равномерного распределения весовой нагрузки и для того, чтобы фиксация протеза распределялась по всей поверхности культи. Повышенный вакуум, создаваемый системой VIP®, стабилизирует культю и решает все проблемы, связанные с изменением её объёма в течение дня.

Артикул

VIP-DH

VIP-DL

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Эффективно компенсирует изменение объёма культи — обеспечивает лучший контроль протеза и комфорт пациента
-  Снижает интенсивность пиковых нагрузок на конечность пациента, повышая комфорт и обеспечивая большую свободу движений
-  Помогает сохранять здоровье кожи культи за счёт улучшения кровообращения и, как следствие, повышает насыщение тканей кислородом
-  Не меняет внешний вид протеза: аккуратная посадка без ущерба для эстетики

Лёгко в
установке

Улучшает
кровооток

Повышает
комфорт

Улучшает
ходьбу

Бесшумный

Легкий


ДОСТУПЕН В ДВУХ ВАРИАНТАХ ВАКУУМА

ВЫБИРАЙТЕ ВАРИАНТ ВАКУУМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ:

 УРОВНЯ АКТИВНОСТИ


 СОСТОЯНИЯ КОЖИ

ВЫСОКИЙ ВАКУУМ (Красный)
254–330 мм рт. ст.

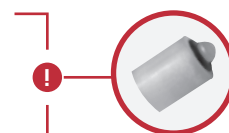

Мы настоятельно рекомендуем использовать мини-клапан для предотвращения дистального смещения.

НИЗКИЙ ВАКУУМ (зеленый)
127–203 мм рт. ст.

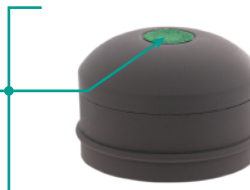

БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ



С МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

	ВЫСОКИЙ ВАКУУМ (КРАСНЫЙ)	НИЗКИЙ ВАКУУМ (ЗЕЛЕНый)
Артикул#	VIP - DH	VIP - DL
Диаметр	66MM	66MM
Высота	48MM	48MM
Вес	75Г	64Г
Материал	СИЛИКОН	СИЛИКОН

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	Артикул#
ЗАГЛУШКА	VE319 - D
МАЛЕНЬКАЯ ЗАГЛУШКА	VE319 - SD
МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА	VE819 - P
ЗАМОК (МАЛЫЙ)	VIP-L1120-S
МИНИ-КЛАПАН (Настоятельно рекомендуется)	MV-009
КОМПЛЕКТ МИНИ-КЛАПАНА	LMV-009
ШТИФТ (1,9 ДЮЙМА)	VIP-92L
ШТИФТ (1,2 ДЮЙМА)	VIP-92S

